

歩行補助器 SPR-376

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
「取扱説明書」はいつでも使用できるように、見やすい所に大切に保管してください。

★用途

本製品は、歩行練習等に使用する歩行補助器です。

★特長

幼児の為に安全性を考慮して設計した、高さ調節が簡単にできる応用性の高い施設用歩行補助器。

●ご使用になる前に



注意

本製品を安全に正しくご使用していただくために、各注意事項を読んで必ずお守りください。表示の意味は次のようになっています。



注意 …… 取り扱いを誤ると、傷害または物的損害の発生が想定されるもの

- 使用者のバランスが保持できない場所では使用しないでください。
- ご使用の際は歩行補助器を持ち上げたりせず、常にキャスターが床と接触している状態でご使用ください。
- 本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
- ご使用の際には医師等の適切な指導のもとで使い方を練習してからご使用ください。
- 歩行練習中は使用者から目を離さないようにしてください。
- 歩行は製品の内側で行うよう注意してください。
- 乾いた平らな表面の上で本製品をご使用ください。滑りやすい面では不安定になり、転倒等の危険があります。
- 階段や急坂等では使用しないでください。
- ご使用前に各部を点検してガタつきやネジの緩み、摩耗等がないか見てください。けがをする恐れがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体がこわれてけがをする恐れがあります。
- 修理が必要な場合は使用を中止して最寄りの営業所へご連絡ください。

●保証とアフターサービス

● 保証書と保証期間

- 保証書（別添）はよく読んで大切に保管してください。保証書がありませんと保証期間中でも代金を請求させていただく場合があります。
- 保証期間は、正常な使用状態で故障した場合、本体フレームは5年間、それ以外は1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

● 修理を依頼される場合

- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

機種名 : SPR-376

お買い上げ年月 : 年 月

故障状況(できるだけ詳細に)

住所、氏名、電話番号

- メーカーより指示のあるとき以外は、決して分解したりしないでください。

● 消耗品（使用により、磨耗・劣化・変質等が生じ、本来の機能が発揮できなくなるもの）

正常な使用において、交換の目安が約2年のもの。 キャスター / ゴム足 / ベルト


点検の時期が来ましたら弊社営業所までご用命ください。点検して必要により有償交換いたします。

●各部の名称及び使用方法

歩行補助器：SPR-376

- 1 高さ調節ノブ(3か所)を緩めて、肘掛の高さを使用者に合せた後、ノブをしっかり締めてください。
- 2 上肢を肘掛にあてがい、固定ベルトを外れないように締めてバランスを保持しながら使用してください。

※ご注意 敷物の上で使用するとゴム足が外れる場合があります。

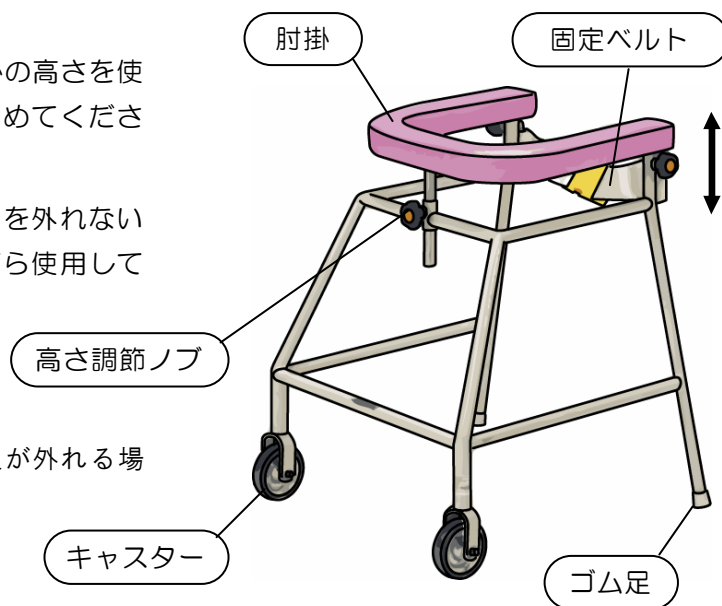

注意 高さ調節後、調節ノブがしっかり締まっているか必ず確認
ゆるんでいると体重をかけたとき落ちて危険です。

●お手入れの仕方

- キャスターの作動を確実にするために車輪は定期的に点検、清掃してください。
- 可動部は定期的にシリコンスプレーで潤滑してください。
- ゴム足がすり減った場合は、早めに交換してください。
- 消耗品等が必要な場合は、最寄りの営業所にご連絡ください。

●仕様

名 称	幼児用歩行補助器
型 式	SPR-376
ベース寸法	約 42(W)×46(D)×53~56(H)cm
胴内寸法	約 22(W)cm
ベルト幅	5 cm
ゴム足サイズ	φ19 mm
質 量	約 5 kg
材 質	スチール，塗装

注) 都合により予告なく仕様の変更を行う場合があります。

酒井医療株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-15-9
<http://www.sakaimed.co.jp>

お問い合わせ (午前 9:00~午後 5:30)

- 修理に関するお問合せ：
 - ・ 平日は最寄りの営業所へ
 - ・ 土曜・日曜及び祝祭日は、☎0120-161-288 (受付コールセンター)
- 商品に関するお問合せ：
最寄りの営業所 または TEL 047-497-2949 (営業部)
- 健康被害などが発生した場合：
最寄りの営業所 または TEL 047-498-1220 (品質保証部)